

Technology You Can Trust

**AND**  
A&D Medical

# ストレッチャースケール

AD-6051A

取引・証明用  
検定付

精度等級  
3級

救急

透析

病棟

NST

老健



ガードル棒、酸素ボンベ金具は、オプションです。  
生体情報モニタ(TM-2590)は、別売です。  
また、酸素ボンベ、減圧弁、輸液バック等はご使用  
イメージのために取り付けたもので、当社では  
取扱をしておりません。



表示部 (プリンタ内蔵)

# 寝た状態で安全に搬送、計量

## ストレッチャースケール

取引・証明用  
検定付

AD-6051A ¥880,000(税抜)

患者の搬送や計量ができるストレッチャー型の検定付体重計。  
病院・老健施設等の入所者の栄養ケアマネジメントやNST(栄養サポートチーム)活動での  
体重測定におすすめの体重計です。

### 寝台部高さ調整 高さ540～940mm

クランクを回すことで、寝台部の高さを約540～940mmまで無段階に調整ができます。



### 安全

#### キャスターータルロック機能

キャスターは、レバーのワンタッチ操作で4輪を  
ロックすることができます。

前輪直進固定 .....

4輪フリー .....

固定(ブレーキ) .....



Caster

### 正確

#### 薄型重量センサ

薄型・高性能の重量センサにより、計量台の厚みを薄くすることができ、  
センサを計量台の四隅に使用することで、乗る位置にかかわらず、  
バラツキがなく、高精度で正確な計量が可能となりました。



Sensor

# 便利

## 風袋2メモリ

着衣などの重量を2つまで設定ができ、設定重量を引いた体重のみの表示が出せます。



## プリンタ内蔵

プリンタは、表示器ケースに内蔵されていますので、ケーブル接続や出っ張ってジャマになる事はありません。測定者が体重値をメモする必要がなく、記録が残せます。

2014/11/ 1 12:00 72.9kg	2014/11/ 1 12:00 (N) 67.9kg (T) 5.0kg	2014/11/ 1 12:00 (N) 71.9kg (PT) 1.0kg
----------------------------	---	--

通常測定

風袋引き測定

プリセット風袋引き測定

(N) : 正味量 Net

総量から風袋量を差し引いた正味の質量です。  
表示してある体重値は風袋量を差し引いてあります。

(T) : 風袋量 Tare

実際に測定した着衣などの質量です。

(PT) : プリセット風袋 Preset Tare

事前に把握している着衣などの質量を風袋設定した値です。

## サイドガード



サイドガードをマットと平行になるように倒すことができるので、患者の移乗を安全に行うことができます。さらにオプションのスライディングマットSM-100を利用すれば更に操作性が向上します。


## プリンタ内蔵表示器

見やすい角度に調整が可能です。また、電池交換も非常にスムーズ



## 酸素ボンベ金具

500ℓ対応 (オプション)

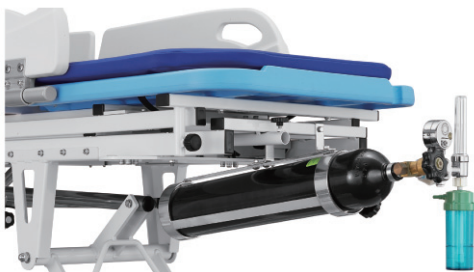

## 便利な小物入れ用カゴ付き

移送時にご利用いただけます。



オプション



**酸素ポンベ金具**  
AD6051-03 ¥26,000(税抜)  
JANコード 4981046712972



**拡張電池ボックス**  
AD6051-04 ¥40,000(税抜) (工場オプション)  
JANコード 4981046713764  
AD6051-05 ¥37,000(税抜) (ユーザーオプション)  
JANコード 4981046713917  
※お客様での取付をお願いいたします。



**スライディングマットSM-100**  
AS-SM-100 ¥60,000(税抜)  
JANコード 4981046712217



**プリンタ用紙(5巻/箱)**  
紙幅58mm 長さ30m  
AX-PP147-S ¥5,000(税抜)  
JANコード 4981046711340



**専用ACアダプタ**  
※付属品と同じ  
AX-TB162 ¥4,500(税抜)  
JANコード 4981046712835



**付属品用ポーチ**  
〈本体に付属されています。〉  
※オプション販売はございません。



**ガートル棒**  
AD6101-01 ¥6,000(税抜)  
JANコード 4981046712194

仕様

品名	ストレッチャースケール
型名	AD-6051A
精度等級	3級(※ご使用地域をご指定ください。)
承認番号	第D109号
ひょう量	150kg
目量	100g
実目量	20g
最小測定量	2kg
最大減算風袋量	150kg
使用温湿度範囲	温度: +5℃~+35℃ 湿度: 85%RH以下(但し結露なきこと)
保存温度範囲	温度: -10℃~+60℃
表示	7セグメント液晶表示 文字高: 22mm
印刷機能	あり
外部出力	RS-232C 1ch(D-SUB 9P)
外形寸法	1940(W)×632(D)×540~940(H)mm 突起部含まず
計量スペース	1940(W)×553(D)mm
本体質量	約89kg(ACアダプタ、乾電池含まず)
電源	専用ACアダプタ AX-TB162: AC100V, 50-60Hz, 10VA 単3形アルカリ乾電池: 6個(別売) ※補助としてご使用ください
乾電池寿命	アルカリ乾電池使用時 連続動作300回以上(乾電池寿命は、周囲の環境や温度により異なります。)
付属品	専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、プリンタ用紙、付属品用ポーチ
標準価格(税抜)	¥880,000
商品コード	AD6051A
JANコード	4981046701464

使用地域区分

使用地域(都道府県)		使用地域の表記 重力加速度の範囲
1	北海道	9.807 ~ 9.803m/s <sup>2</sup>
2	青森県、岩手県、宮城県、秋田県	9.804 ~ 9.800m/s <sup>2</sup>
3	宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県	9.802 ~ 9.798m/s <sup>2</sup>
4	栃木県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都(八丈・小笠原を除く)、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県	9.800 ~ 9.796m/s <sup>2</sup>
5	長野県、東京都(全域)、神奈川県、山梨県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(薩摩地方に限る)	9.798 ~ 9.794m/s <sup>2</sup>
6	鹿児島県(薩摩地方を除く)	9.794 ~ 9.790m/s <sup>2</sup>
7	沖縄県	9.792 ~ 9.789m/s <sup>2</sup>

2箇所に記載されている県は、どちらの重力加速度の範囲でも使用できます。

ME機器に関するお問い合わせは

エー・アンド・ディME機器相談センター **0120-707-188**

受付時間: 月~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)  
9:00~12:00 13:00~17:00

販売元 **AND** 株式会社 **エー・アンド・ディ**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759  
■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052  
■名古屋営業所 TEL.052-726-8763(直) FAX.052-726-8769  
■大阪営業所 TEL.06-7668-3904(直) FAX.06-7668-3901  
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058  
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>

※ 取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。 ※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。  
\*AD6051A-ADJC-01-PR1-15308